

STARZ TIPZ

# ATTIVITA' RISCHIOSA

**Il principio di non maleficenza impone al dentista l'obbligo etico di evitare di nuocere al paziente. La scienza ha già dimostrato al di là di ogni ragionevole dubbio che il dispositivo più utilizzato in odontoiatria può anche essere il più pericoloso.**

**Cosa c'è all'interno dei tuoi puntali per siringa aria/acqua? Perché li tratti in modo diverso dagli aghi o dalla cannula di aspirazione?**

Questa differenza di standard espone i tuoi pazienti a un rischio significativo di contaminazione crociata. Diversi studi mostrano la presenza di carica batterica all'interno del puntale, e la conformazione stessa del puntale ne impedisce la sterilizzazione. Come dice la massima, se non puoi pulirlo, allora non puoi sterilizzarlo. Molti di voi hanno tentato di pulire l'interno di un puntale aria/acqua otturandolo liberandolo con un filo ortodontico o una lima endodontica. Ovviamente questa è una soluzione del tutto inefficace e inadatta per un problema molto comune.

Il puntale sterilizzabile della siringa aria/acqua è sicuro solo per il paziente numero uno. Tuttavia, etichettare un oggetto come sterilizzabile in autoclave significa che esso può resistere alle alte temperature dell'autoclave, ma non ne garantisce la sterilizzazione tramite autoclave. Agenzie regolatorie di tutto il mondo hanno affermato che se un dispositivo è difficile da pulire la soluzione monouso è raccomandata.

FATTO:

*Nel 2013 il Centro per il Controllo delle Malattie ha confermato il primo caso di trasmissione da paziente a paziente (infezione crociata) di epatite C in uno studio dentistico.*

# LA SPORCA VERITA'


**La microscopia elettronica a scansione (SEM) rivela la presenza di estesa corrosione all'interno dei micro-condotti metallici dei puntali non monouso. La corrosione crea una superficie ruvida che diventa un ambiente ideale per l'adesione di microorganismi.**

Il lume è il canale di piccolo diametro all'interno di un tubo. Più lungo è il lume, meno è efficace la sterilizzazione della superficie interna. Questo è il motivo per cui è stata abbandonata la vecchia pratica di riutilizzare gli aghi ipodermici. In effetti, il lume di un puntale aria/acqua è più lungo rispetto agli aghi usati dai dentisti ed è dunque più difficile da sterilizzare.

La sporca verità è che i batteri entrano e non si possono rimuovere o eliminare in modo affidabile, a causa della conformazione inaccessibile del puntale. E' strutturalmente difficile decontaminare un puntale in modo adeguato.

## FATTO:

*Uno studio del 2014 sottoposto a valutazione inter pares ha mostrato che il 60% dei puntali riutilizzabili conteneva unità formanti colonie (cfu) dopo essere stati lavati e messi in autoclave.*

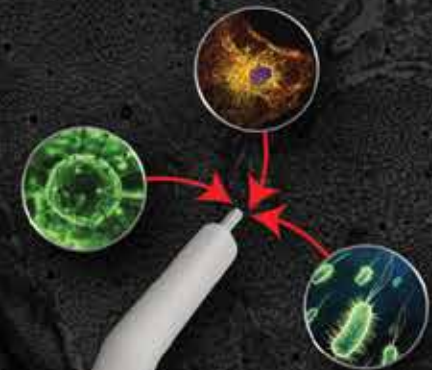

*Sangue, tessuti e saliva si depositano all'interno del lume del puntale, finché iniziano a otturarlo. La lunghezza e il diametro minuscolo del lume ne rendono quasi impossibile la pulizia e sterilizzazione.*

Guarnizione,  
essenziale nel  
punto di contatto

Scanalatura di bloccaggio

Condotti separati  
per aria e acqua

6 Canali dell'Aria



### Caratteristiche del modello Original

Lunghezza 95mm con canali dell'aria a configurazione esagonale

Può essere piegato per regolarne la curvatura

Disponibile in 6 diversi colori, sia singoli che assortiti

Il modello Starz Tipz Original è preferito dalla maggior parte dei clienti che utilizza siringhe di "stile USA" come A-dec, DCI, Forest e Heka



Blu zaffiro




Giallo meringa



Lampone rodonite



Arancione citrino

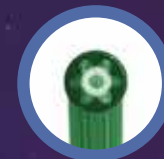

Verde giada



Viola ametista


*I modelli di puntale Original e HP sono intercambiabili tra loro e funzionano con tutti gli adattatori allo stesso modo*

Guarnizione,  
essenziale nel  
punto di contatto

Scanalatura di  
bloccaggio

Condotti separati  
per aria e acqua

2 Canali dell'Aria

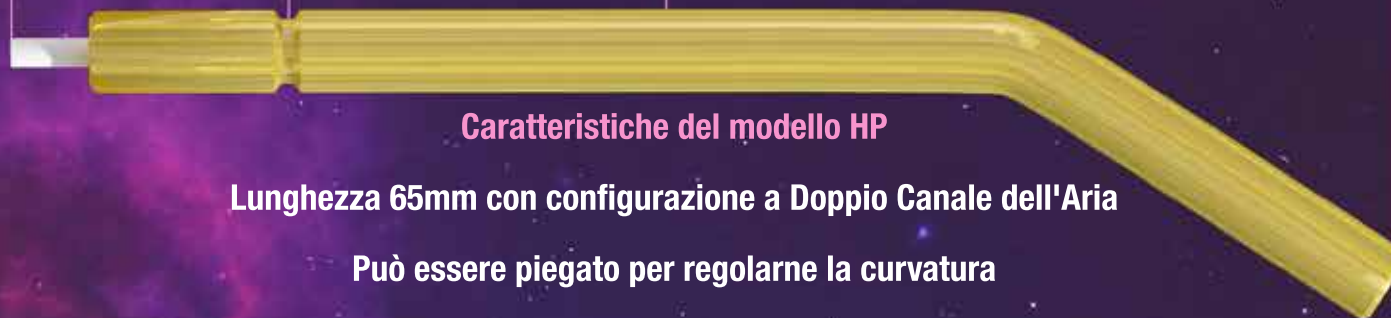

### Caratteristiche del modello HP

Lunghezza 65mm con configurazione a Doppio Canale dell'Aria

Può essere piegato per regolarne la curvatura

Disponibile in 6 diversi colori, sia singoli che assortiti

Il modello HP, con Doppio Canale dell'Aria, offre una pressione dell'aria maggiore rispetto al modello Original

Starz Tipz HP è preferito dalla maggior parte dei clienti che utilizza siringhe di "stile Europeo" come Sirona, Kavo e Luzzani



Blu zaffiro



Giallo meringa




Lampone rodonite



Arancione citrino



Verde giada

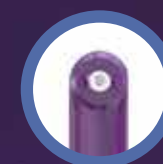

Viola ametista

*I modelli di puntale Original e HP sono intercambiabili tra loro e funzionano con tutti gli adattatori allo stesso modo*

# ALL'INTERNO DELLO STARZ SYSTEM

QRSTZ1090 Adattatore Kavo K4



## Uno Sguardo all'Interno dell'Adattatore Perfetto

**Progettato in modo specifico per il particolare tipo di siringa che utilizzi, ogni adattatore Starz è un dispositivo medico preciso che unisce elementi metallici complessi a guarnizioni in silicone aventi differenti funzioni e identificate per colore, in modo che la tua siringa possa accogliere il puntale monouso Starz ad alte prestazioni.**

**Sigillatura:**  
Offre la assoluta separazione di aria e acqua

**Lubrificazione:**  
Facilita l'inserimento / rimozione del puntale

**Impugnatura:**  
Assicura che il puntale sia fissato saldamente

**Materiale delle guarnizioni:**  
Specificamente selezionato e approvato per autoclavaggio



---

**La combinazione di un puntale monouso di alta qualità con un adattatore durevole crea il perfetto sistema di puntale per siringa aria/acqua, che fornisca aria immediatamente asciutta e affidabilità della prestazione.**

---

**Il sistema può essere installato in pochi secondi su qualunque siringa aria / acqua**


---

**Disponibilità di Kit di Manutenzione per assicurare la durevolezza dell'adattatore**

---

**Prestazione affidabile, caratteristiche di emissione costanti, e maggiore igiene**

---

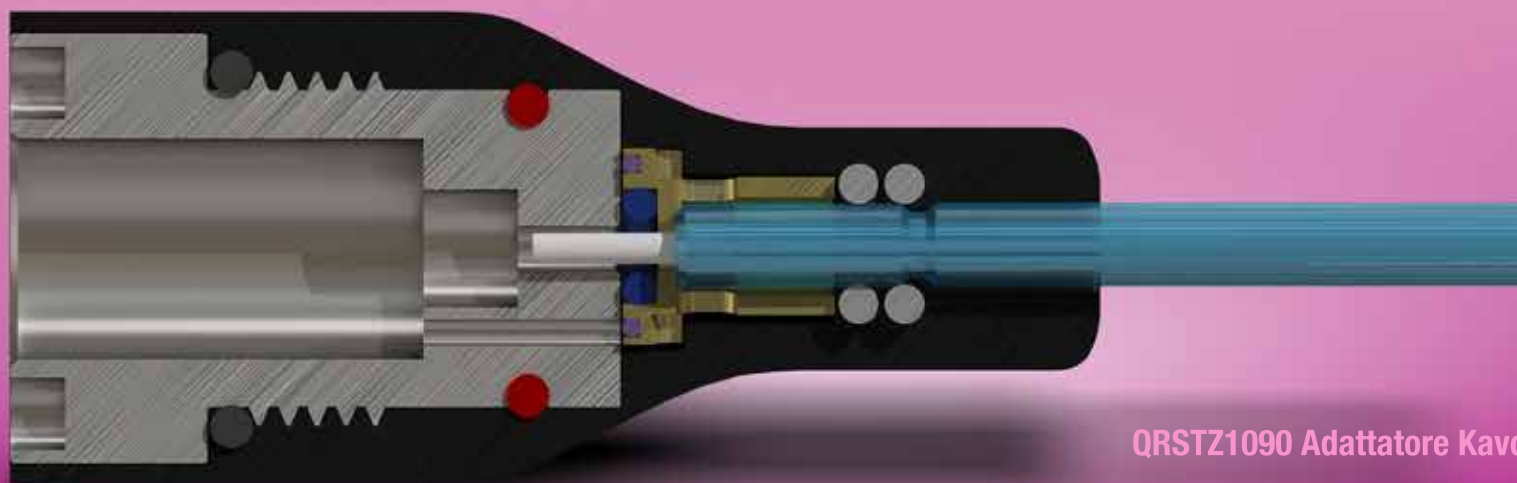

QRSTZ1090 Adattatore Kavo K4

Il Sistema Starz Tipz è una soluzione comprovata che riduce il rischio di infezione crociata e allo stesso tempo migliora le prestazioni di questo comune dispositivo che si utilizza su ogni paziente. Non avrai più puntali che perdono, danneggiati e sporchi. I puntali Starz si integrano con i tuoi attuali strumenti rapidamente e senza interruzioni e sono compatibili con una vasta gamma di siringhe americane, europee e giapponesi. In pochi minuti potrai convertire la tua siringa per iniziare a utilizzare Starz Tipz, ed è altrettanto facile tornare al vecchio puntale se per qualunque motivo non sei soddisfatto. Grazie al livello di prestazione che garantiamo e al programma di garanzia estesa rimarrai soddisfatto per molti anni a venire. Dentisti di tutto il mondo scelgono Starz Tipz perché esigono prodotti di alta qualità per assicurare la massima professionalità ai propri pazienti.

**STARZ TIPZ**  
5 Star Performance

**Raggiungi le Stelle - Il Sistema di Puntali ad Alta Prestazione**



# GAMMA DI PRODOTTI COMPLETA

 a dec

 TAKARA  
BELMONT

 anibos

 AW



MORITA

 Chirana

 DCI  
EQUIPMENT



 Ritter Dental™  
the dental experts

 ULTRADENT

 hekadental®

 forest  
dental

CASTELLINI

 OSADA

 MIDMARK

 Pelton & Crane

 TARO  
SINCE 1948: EXPERIENCE  
AND INNOVATION

 LUZZANI DENTAL

 sirona  
The Dental Company

- Immediato upgrade di un dispositivo essenziale e spesso problematico
- Accoppiamento e finitura perfetti per esaltare l'aspetto e la prestazione del tuo dispositivo
- Facile da Installare - montaggio semplice / plug and play
- Facile da Usare - inserisci ed estrai il puntale con una semplice pressione
- Facile da Pulire - la superficie liscia riduce la contaminazione
- Sterilizzabile in autoclave: una volta installato sulla siringa, non è necessario rimuoverlo
- Durevole - componenti in metallo medicale, guarnizioni di alta qualità, finiture specialistiche
- Gli adattatori registrati ricevono una garanzia estesa a 24 mesi

Tutti i produttori di siringhe elencati sopra sono marchi registrati delle rispettive società e non sono in alcun modo associati a Starz Tipz, Starz Inc., o ai loro affiliati.

# Sei Pronto a Provare Starz Tipz?

## Passo 1:

### Identifica la Tua Siringa Aria / Acqua

LUZZANI



Codice  
del Kit di Prova:  
**QRSTZT1050**

SIRONA



Codice  
del Kit di Prova:  
**QRSTZT1070**

### HAI BISOGNO DI AIUTO PER IDENTIFICARE LA TUA SIRINGA?

- Fai una foto della Tua siringa Aria / Acqua
- Manda la foto via email indicando il nome del Tuo studio, l'indirizzo, il numero di telefono e il nome della persona da contattare a: [info@idsdental.it](mailto:info@idsdental.it)

Un incaricato di Starz Tipz identificherà la Tua siringa. Quando la tua siringa sarà stata identificata, saprai quale Kit di Prova ordinare.



**Installazione Immediata**



**Se il Tuo studio non ha mai provato o acquistato Starz Tipz, il Kit di Prova è stato pensato per Te.**

Il Kit di Prova Starz Tipz ti dà l'opportunità di provare senza impegno il nostro sistema con puntale monouso. Grazie alla garanzia di rimborso entro 30 giorni, puoi provare il sistema nel tuo studio e vedere se Starz Tipz ti soddisfa. Se ritieni che il sistema Starz Tipz non sia adatto al tuo studio, puoi rispedire l'adattatore al nostro magazzino entro 30 giorni senza alcun addebito per la prova.

E' possibile acquistare un solo Kit di Prova per ogni studio dentistico.

# In che cosa consiste il Kit di Prova?



Dopo aver identificato quale siringa aria/acqua utilizzi, puoi ordinare il Kit di Prova appropriato. Il Kit di Prova comprende un adattatore Starz Tipz, quindici puntali monouso Starz Tipz Original e quindici puntali monouso Starz Tipz HP per poterli provare.

La combinazione di un puntale monouso di alta qualità con un adattatore durevole crea il perfetto sistema di puntale monouso per siringa aria/acqua, che fornisce aria immediatamente asciutta e affidabilità della prestazione.

Il Kit di Prova comprende tutto ciò che ti serve per portare il sistema Starz nel tuo studio e valutarlo senza rischi.

*E' possibile acquistare un solo Kit di Prova per ogni studio dentistico.*



Contiene 15 campioni  
Starz Tipz Original



Contiene 15 campioni  
Starz Tipz HP



Contiene 1 adattatore  
Starz Tipz scelto da Te



**Kit di Prova Luzzani MiniLight**

QRSTZT1050

**Kit di Prova Kavo K4**

QRSTZT1090

**Kit di Prova Sirona Sprayvit C8**

QRSTZT1070

**Kit di Prova Cefla SP**

QRSTZT1035



**Starz Tipz Pak**

STZ778 (150 Puntali) Colori Assortiti

**Starz Tipz Pro Pak**

STZ888 (1500 Puntali) Colori Assortiti



**Starz Tipz Pak HP**

STZ711 (150 Puntali) Colori Assortiti

**Starz Tipz Pro Pak HP**

STZ811 (1500 Puntali) Colori Assortiti



**Adattatore Luzzani MM / ML**

QRSTZ1050



**Adattatore Sirona Sprayvit C8**

QRSTZ1070



**Adattatore Cefla SP**

QRSTZ1035



**Adattatore Kavo K4**

QRSTZ1090



**Kit di Manutenzione Luzzani MM**

ORK1050



**Kit di Manutenzione Sirona C8**

ORK1070

**Kit di Manutenzione Kavo K4**

ORK1090

**Kit di Manutenzione Cefla SP**

ORK1035

Per vedere tutti gli Adattatori, Kit di Manutenzione, Kit di Prova e Prodotti Starz Tipz disponibili

Ti invitiamo a visitare:

[WWW.IDSDENTAL.IT/ZOOM/STARZ.HTML](http://WWW.IDSDENTAL.IT/ZOOM/STARZ.HTML)



Tel: **019 862080**

[www.ids dental.it/zoom/starz.html](http://www.ids dental.it/zoom/starz.html)

Email: [info@idsdental.it](mailto:info@idsdental.it)